


Program 30-12-16	Start 12:03:32	Stop 12:20:27	S/N ST1-5036
Program 134	Nr procesu 00034		Firmware 14.6

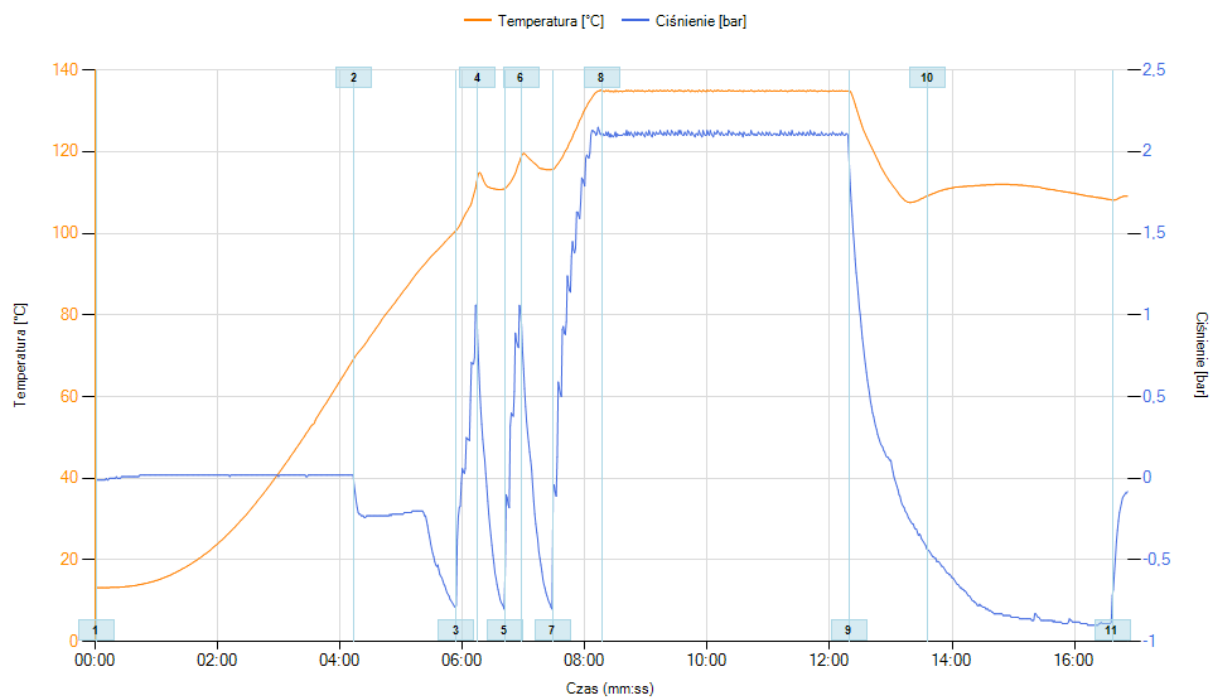

Stage	Time [s]	Step [s]	p [bar]	t [°C]	t teor. [°C]
0 Locking door	00:00		0.00	13.2	13.2
1 Heating up	00:01	04:12	0.02	69.0	69.0
2 Vacuum I	04:14	01:39	-0.79	100.5	100.5
3 Steam Pulse I	05:54	00:20	1.06	112.5	112.5
4 Vacuum II	06:15	00:26	-0.80	110.9	110.9
5 Steam Pulse II	06:42	00:15	1.01	118.3	118.3
6 Vacuum III	06:58	00:30	-0.80	115.7	115.7
7 Pressurizing	07:29	00:47	2.11	135.1	135.1
8 Sterilizing	08:17	04:01	2.10	135.0	134.8
9 Depressurizing	12:19	01:16	-0.43	109.1	109.1
10 Drying	13:36	03:00	-0.88	108.2	108.2
11 Equalizing	16:37	00:15	-0.08	109.1	109.1

Serialization Complete

TEMP.
STERYLIZACJI 134

Czas 04:01

Temperatura min 135

Temperatura max 135,2

Ciśnienie min 2,09

Ciśnienie max 2,13

Miejsce pasek do kontroli sterylizacji